



medi GmbH & Co. KG
 Medicusstraße 1
 D-95448 Bayreuth
 Germany
 T +49 921 912-0
 F +49 921 912-780
 ortho@medi.de
 www.medi.de

medi Australia Pty Ltd
 83 Fennell Street
 North Parramatta NSW 2151
 Australia
 T +61-2 9890 8696
 F +61-2 9890 8439
 sales@mediaustralia.com.au
 www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
 Adamgasse 16/7
 6020 Innsbruck
 Austria
 T +43 512 57 95 15
 F +43 512 57 95 15 45
 vertrieb@medi-austria.at
 www.medi-austria.at

medi Belgium NV
 Staatsbaan 77/0099
 3945 Ham
 Belgium
 T: +32-11 24 25 60
 F: +32-11 24 25 64
 info@medibelgium.be
 www.medibelgium.be

medi Canada Inc / médi Canada Inc
 597, Rue Duvernay, Verchères
 QC Canada J0L 2R0
 T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
 F: +1 888-583-6827
 service@medicanada.ca
 www.medicanada.ca

MAXIS a.s.,
 medi group company
 Slezská 2127/13
 120 00 Prague 2
 Czech Republic
 T: +420 571 633 510
 F: +420 571 616 271
 info@maxis-medica.com
 www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
 Vejlegardsvej 59
 2665 Vallensbæk Strand
 Denmark
 T +45-70 25 56 10
 F +45-70 25 56 20
 kundeservice@sw.dk
 www.meditandmark.dk

medi Bayreuth Espana SL
 C/Canigo 2-6 bajos
 Hospitalet de Llobregat
 08901 Barcelona
 Spain
 T +34-932 60 04 00
 F +34-932 60 23 14
 medi@mediespana.com
 www.mediespana.com

medi France
 Z.I. Charles de Gaulle
 25, rue Henri Farman
 93297 Tremblay en France Cedex
 France
 T +33-1 48 61 76 10
 F +33-1 49 63 33 05
 infos@medi-france.com
 www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
 Bokor u. 21.
 1037 Budapest
 Hungary
 T +36 1 371-0090
 F +36 1 371-0091
 info@medi.hu
 www.medi.hu

medi Japan K.K.
 5-1 Nihonbashi Kabutocho Chuoku
 103-0026 Tokyo
 Japan
 T: +81 3 6778 2590
 F: +81 3 5847 7901
 info@medi-japan.jp
 www.medi-japan.co.jp

E+motion®

Manumed® active E+motion®

Handgelenk-Kompressionsbandage mit Stabilisierungsstab · Wrist compression bandage with stabilizing rod

Gebrauchsanweisung, Instructions for use, Mode d'emploi, Instrucciones de uso, Instruções para aplicação, Istruzioni per l'uso, Gebruiksaanwijzing, Navod k použití, Инструкция по использованию, Instrukcja zakładania, Інструкція з використання, دليل الاستخدام, Návod na použitie, Instrucțiuni de utilizare, מודעות שימוש.

medi Performance Collection



medi. I feel better.

Wichtige Hinweise

Das Medizinprodukt **MD** ist nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Wird es für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder ihr versorgendes Fachgeschäft. Tragen Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.

Important notes

This medical device **MD** is made for single patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability will become invalid. If undue pain or an unpleasant sensation develops while you are wearing the product, please consult your doctor or orthotist immediately. Do not wear the product over open wounds, and use it only as instructed by your doctor or orthotist.

Remarques importantes

Le dispositif médical **MD** est destiné à un usage individuel. S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, le fabricant décline toute responsabilité. Si des douleurs extrêmes ou une sensation de gêne devaient se manifester durant l'utilisation, veuillez consulter immédiatement votre médecin ou votre technicien-orthopédiste. Ne portez pas le produit sur des plaies ouvertes. Ne portez le produit qu'uniquement après avoir reçu les instructions du médecin.

Advertencia importante

El producto médico **MD** solo está destinado a su uso en un paciente. En el caso de que se utilice para el tratamiento de más de un paciente, desaparece la responsabilidad del fabricante sobre el producto. De producirse dolores excesivos o una sensación de incomodidad durante el uso del producto, sírvase solicitar ayuda de su médico o técnico ortopédico inmediato. No utilice el producto sobre heridas abiertas. Úselo sólo por prescripción médica.

Indicações importantes

O dispositivo médico **MD** destina-se a ser utilizado apenas num paciente. Se for utilizado para o tratamento de mais de um paciente, prescreve a responsabilidade do fabricante. Se surgirem dores excessivas ou uma sensação desagradável durante a utilização, por favor consulte imediatamente o seu médico ou técnico ortopédico. Não use o produto sobre feridas abertas e utilize-o apenas sob recomendação médica.

Avvertenze importanti

Dispositivo medico **MD** ad essere utilizzata da un singolo paziente. L'utilizzo per il trattamento di più di un paziente farà decadere la responsabilità da parte del produttore. Nel caso in cui, durante l'uso, sopraggiungano dolori o sensazione di disagio, consultare immediatamente il medico o il negozio specializzato di fiducia che l'ha fornita. Non applicare il prodotto su ferite aperte e utilizzare sempre secondo le istruzioni del medico curante.

Belangrijke aanwijzingen

Het medische product **MD** is gemaakt voor gebruik door één patiënt. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid. Mocht u tijdens het dragen veel pijn of een onaangenaam gevoel hebben, vraag onmiddellijk uw arts of orthopedisch instrumentenmaker om raad. Draag het product niet op open wonden en slechts na medische instructie vooraf.

Důležitá informace

Medicinský produkt **MD** je určen pro použití u pouze jednoho pacienta. Budete-li ho používat při léčbě více než jednoho pacienta, zaniká záruka za produkt poskytovaná výrobcem. Pokud by se během nošení vyskytly nepřiměřené bolesti nebo nepříjemný pocit, sejměte, prosím okamžitě výrobek a vyhledejte svého lékaře nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Výrobek nenoste na otevřených ranách a používejte jen podle předchozího lékařského návodu.



4 051526 930858



E013671/11.2020

Manumed active

Zweckbestimmung

Manumed active ist eine Handgelenkkompressionsbandage.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Stützung des Handgelenks durch eine Verstärkung bzw. Pelotte notwendig ist, wie z. B.:

- Handgelenkverletzungen, z.B. Verstauchungen, Distorsionen
- Handgelenkarthrose
- Tendovaginitis
- Instabilitätsgefühl

Kontraindikationen

Zur Zeit nicht bekannt.

Risiken / Nebenwirkungen

Es kann bei fest anliegenden Hilfsmitteln zu örtlichen Druckerscheinungen oder Einengung von Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten:

- Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, vor allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, Schwellung oder Rötung)
- Empfindungs- und Durchblutungsstörungen (z.B. bei Diabetes, Krampfadern)
- Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs

Beim Tragen von eng anliegenden Hilfsmitteln kann es zu örtlichen Hautreizungen bzw. Irritationen kommen, die auf eine mechanische Reizung der Haut (vor allem in Verbindung mit Schweißbildung) oder auf die Materialzusammensetzung zurückzuführen sind.

Vorgesehene Patientengruppe

Angehörige der Gesundheitsberufe versorgen anhand der zur Verfügung stehenden Maße/Größen und der notwendigen Funktionen/Indikationen Erwachsene und Kinder unter Berücksichtigung der Informationen des Herstellers nach ihrer Verantwortung.

Tragehinweis

Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden, während längerer Ruhephasen jedoch (z.B. Schlafen) sollte die Bandage abgelegt




1



2



3

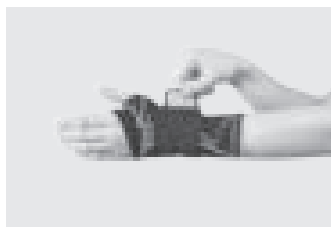

4

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31-76 57 22 555
F +31-76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Polska Sp. z o.o.
ul. Łąbiedzka 22
44-121 Gliwice
Poland
T: +48-32 230 60 21
F: +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351-21 843 71 60
F +351-21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703, T1, CES WEST BUND CENTER,
No. 277, Long Lan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People's Republic of China
T: +86-21 50582319
F: +86-21 50582319

Medi Turk Ortopedi Medikal İc ve Dis Tic. AS
Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak No: 16 /4-5
06510 Çankaya Ankara
Turkey
T: +90 312 435 20 26
F: +90 312 434 17 67
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
Ukraine
T: +380 44 591 11 63
F: +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

werden. Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl erfolgen. Bei unerwarteten, übermäßigen Veränderungen, z.B. eine Verstärkung der Beschwerden, legen Sie das Produkt bitte umgehend ab und kontaktieren Ihren Arzt oder versorgendes Fachgeschäft.

Die Bandage ist zum Gebrauch in Wasser geeignet. Bitte spülen Sie das Produkt anschließend gründlich aus.

Anziehen / Ablegen

Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von geschultem Fachpersonal erfolgen sollte.

- Kletten Sie das beiliegende Gurtband vor dem Anlegen der Bandage mittig auf den Bereich der Stabtasche. Dabei wird das Gurtband mit dem breiten Ende auf die Stabtasche geklettet, so dass die Daumenöffnung der Bandage und das Gurtband zu einer Seite hin zeigen (Abb. 1).
- Ziehen Sie die Bandage über die Hand. Dabei ist der „E+motion“ Schriftzug auf dem Handrücken zu sehen (Abb. 2).
- Schließen Sie das Gurtband derart, dass die Öffnung im Gurtband über dem äußeren Handknöchel positioniert ist (Abb. 3).
- Kletten Sie anschließend das schmale Gurtende auf den Gurt (Abb. 4).
- Achten Sie beim Anlegen der Bandage auf die richtige Stabposition. Der Stab sollte möglichst gerade zum Unterarm verlaufen.

Zum Abnehmen öffnen Sie das Gurtband. Greifen Sie von der Handinnenfläche aus in die Bandage. Mit Druck auf die innen liegende Tasche und die Schiene ziehen Sie die Bandage von der Hand.

Anpassen der Handschiene

Die Handschiene lässt sich bei einer Temperatur von ca. 200 °C individuell anpassen.

Pflegehinweise

Klettverschlüsse bitte vor dem Waschen schließen. Wir empfehlen die Verwendung eines Wäschenetzes. Die Schiene muss vor dem Waschen entfernt werden. Weichspüler, Fette, Öle, Lotionen, Salben und Seifenrückstände können das Material angreifen, den Clima Comfort-Effekt beeinträchtigen und Hautirritationen hervorrufen.

- Waschen Sie das Produkt, vorzugsweise mit medi clean Waschmittel, von Hand, oder im Schonwaschgang bei 30°C mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler.
- Nicht bleichen.
- Lufttrocknen.
- Nicht bügeln.

- Nicht chemisch reinigen.



Lagerungshinweis

Bitte das Produkt trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Materialzusammensetzung

Polyamid, Polyester, Merino, Elastan

Haftung

Die Haftung des Herstellers erlischt bei nicht zweckmäßiger Verwendung. Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Entsorgung

Sie können das Produkt über den Hausmüll entsorgen.



Ihr medi Team

wünscht Ihnen schnelle Genesung!

Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wie beispielsweise Beschädigungen des Gestricks oder Mängel in der Passform, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren medizinischen Fachhändler. Nur schwerwiegende Vorkommnisse, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod führen können, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) definiert. Die Rückverfolgbarkeit des Produktes ist mit dem UDI Code **UDI** gewährleistet.

Manumed active

Intended purpose

Manumed active is a wrist compression support.

Indications

All indications in which support of the wrist by a strengthening or pad is necessary, such as:

- Wrist injuries, e.g. sprains, distortions
- Osteoarthritis of the wrist
- Tenosynovitis
- Instability

Contraindications

None known at present.

Risks / Side Effects

If the aids are too tight, this can cause local pressure sores or constriction of blood vessels or nerves. Therefore you should consult the doctor treating you before you use it if the following circumstances apply to you:

- Condition or injury of the skin in the area of application, particularly with infectious indications (excessive heat, swelling or reddening)
- Paraesthesia and circulatory disorders (e.g. as seen in diabetes, varicose veins)
- Lymph drainage disorders – equally, swelling of soft tissue adjacent to the area of application which is not related to a condition

When wearing snug-fitting aids, this can result in localised skin inflammation or irritation that is due to mechanical irritation of the skin (particularly in conjunction with sweating) or due to the composition of the material.

Intended patient groups

Healthcare professionals should provide care to the adults and children, applying the available information on the measurements/sizes and necessary functions/indications and in line with the information provided by the manufacturer, and acting under their own responsibility.

Note on wearing

In principle, the support can be worn for the whole day but should be taken off during longer periods of rest (e.g. sleep). But you should make this dependent on how you feel. In the event of unexpected, excessive changes, e.g. an intensification of the symptoms, please take the product off immediately and contact your doctor or supplying dealer.

The support is suitable for use in water. After use, please rinse out thoroughly.

Putting on / Taking off

Please note that initial fitting should be supervised by a qualified healthcare professional.

- Before you put the bandage on, stick the attached strap to the middle of the cloth-covered support. The wide end of the strap should be attached to the cloth-covered support so that the thumb opening in the bandage and the strap are on the same side (Fig. 1).
- Now pull the bandage over your hand. The “E+Motion” slogan should be on the back of the hand here (Fig. 2).
- Fasten the strap so that the opening in the strap goes over your outside wristbone (Fig. 3).
- Then attach it by affixing the narrow end of the strap to the strap (Fig. 4).
- Ensure that the support is positioned correctly when you put the bandage on. The support should be lined up with the underside of your forearm as straight as possible.

To take it off, undo the strap. Push the palm of your hand out of the bandage. Apply pressure to the inside pockets and guides, and pull the bandage off your hand.

Adjusting the splint

The splint can be individually adjusted at a temperature of around 200 °C.

Care instructions

Hook and loop fasteners should be closed for washing. We recommend using a laundry bag. The splint must be removed before washing. Fabric softeners, fats, oils, lotions, ointments and soap residues can affect the material, hinder the Clima Comfort effect and cause skin irritations.

- Wash the product by hand, preferably using a medi clean detergent, or in delicate cycle at 30°C using a mild detergent without fabric conditioners.
- Do not bleach.
- Leave to dry naturally.
- Do not iron.
- Do not dry clean.



Storage instructions

Keep the product in a dry place and do not expose to direct sunlight.

**Composition**

Polyamide, polyester, merino, elasthane

Liability

The manufacturer's liability will become void if the product is not used as intended. Please also refer to the corresponding safety information and instructions in this manual.

Disposal

The product can be disposed of in the domestic waste.

**Your medi Team**

Wishes you a speedy recovery!

In the event of any complaints regarding the product such as damage to the fabric or a fault in the fit, please report to your specialist medical retailer directly. Only serious incidents which could lead to a significant deterioration in health or to death are to be reported to the manufacturer or the relevant authorities in the EU member state. The criteria for serious incidents are defined in Section 2, No. 65 of the Regulation (EU) 2017/745 (MDR). The traceability of this product is assured via a UDI code UDI.

Manumed active

Utilisation prévue

Manumed active est un bandage de compression pour l'articulation de la main.

Indications

Toutes les indications pour lesquelles un support du poignet à l'aide d'un renfort ou d'une pelote est nécessaire, par exemple :

- Lésions de l'articulation de la main, p. ex. entorses, distorsions
- Arthrose du poignet
- Tendovaginite
- Impression d'instabilité

Contre-indications

Aucune connue à ce jour.

Risques / Effets secondaires

Des accessoires trop serrés peuvent provoquer des phénomènes de compression locale ou des rétrécissements de vaisseaux sanguins ou de nerfs. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin traitant avant l'utilisation si vous présentez les symptômes suivants :

- Affections ou lésions de la peau dans la zone d'application, en particulier signes d'infection (échauffement excessif, gonflement ou rougeur)
- Troubles de la sensibilité et troubles circulatoires (par ex. diabète, varices)
- Troubles du drainage lymphatique – de même que gonflements d'origine incertaine des parties molles situées en dehors de la zone d'application

Porter des accessoires trop serrés peuvent provoquer des irritations/démangeaisons localisées dus à une irritation mécanique de la peau (en particulier liée à la transpiration) ou à la composition de l'accessoire.

Groupe de patients prévu

Les professionnels de la santé traitent les adultes et les enfants selon les dimensions/tailles disponibles et les fonctions/indications requises sur la base des informations du fabricant sous leur propre responsabilité.

Conseils de port

En principe, le bandage peut être porté toute la journée, mais il est toutefois vivement conseillé, pendant des phases de repos de plus longue durée (par ex. pendant le sommeil), de retirer le bandage. Chaque personne doit toutefois évaluer son propre confort. Si vous constatez des changements inattendus et

excessifs, par ex. une aggravation des symptômes, veuillez immédiatement le retirer et contactez votre médecin ou votre revendeur spécialisé.

Le bandage peut être utilisé dans l'eau. Veuillez ensuite rincer abondamment le produit.

Pose / Retrait

Veuillez noter que vous devrez effectuer la première pose sous les instructions d'un personnel qualifié formé à cet effet.

- Fixez la sangle au centre de la zone de l'attelle avant la pose du bandage. Lors de la fixation, placez l'extrémité large de la sangle sur la bande agrippante de l'attelle en veillant à ce que l'ouverture du bandage pour le pouce et la sangle soient orientées dans la même direction (fig. 1).
- Enfilez le bandage par-dessus la main. L'inscription «E+motion» doit être visible sur le dos de la main (fig 2).
- Fermez la sangle en veillant à ce que l'ouverture de la sangle soit positionnée sur l'extérieur du poignet (fig. 3).
- Fixez ensuite, à l'aide du velcro, l'extrémité étroite de la sangle sur la sangle (fig. 4).
- Veillez à positionner correctement l'attelle lors de la pose du bandage. L'attelle devrait être aussi droite que possible dans la continuité de l'avant-bras.

Pour retirer le bandage, ouvrez la sangle. Attrapez le bandage du côté de la surface interne de la main. Passez le bandage par-dessus la main en faisant pression sur le support palmaire intérieur et l'attelle.

Ajustement de l'éclisse

L'éclisse palmaire peut être ajusté de manière individuelle à une température d'env. 200 °C.

Conseils d'entretien

Fermer les bandes agrippantes avant le lavage. Nous recommandons d'utiliser un filet à linge. Retirez l'attelle avant de laver. L'adoucissant, les matières grasses, l'huile, les lotions, la pommade et les restes de savon peuvent endommager la matière, diminuer l'effet Clima Comfort et causer des irritations de la peau.

- Lavez le produit à la main, de préférence en utilisant le produit de lavage medi clean, ou en machine sur programme délicat à 30°C avec une lessive pour linge délicat et sans adoucissant.
- Ne pas blanchir.
- Séchage à l'air.
- Ne pas repasser.

- Ne pas nettoyer à sec.



Conseils de conservation

Conservez le produit dans un endroit sec et évitez une exposition directe au soleil.



Composition

Polyamide, Polyester, laine mérinos, élasthanne

Responsabilité

Toute utilisation non conforme annule la responsabilité du fabricant. Veuillez à cet effet consulter également les consignes de sécurité et les instructions figurant dans ce mode d'emploi.

Recyclage

Vous pouvez jeter ce produit dans les ordures ménagères.



Votre équipe medi

vous souhaite un prompt rétablissement !

En cas de réclamation en rapport avec le produit, telle que par exemple un tricot endommagé ou des défauts d'ajustement, veuillez contacter directement votre revendeur médical. Seuls les incidents graves pouvant mener à une détérioration considérable de l'état de santé ou à la mort doivent être signalés au fabricant ou aux autorités compétentes de l'État membre. Les incidents graves sont définis à l'article 2 no 65 du Règlement (UE) 2017/745 (MDR). Le code UDI **UDI** permet le suivi du produit.

Manumed active

Finalidad

Manumed active es un vendaje de compresión para la muñeca.

Indicaciones

Todas las indicaciones en las que se requiera un apoyo de la muñeca con un refuerzo o una almohadilla, p. ej.:

- Lesiones en la muñeca, por ejemplo, esguinces, dislocaciones
- Artrosis en la muñeca
- Tendovaginitis
- Sensación de inestabilidad

Contra-indicaciones

No se conocen hasta la fecha.

Riesgos / Efectos secundarios

Los elementos de colocación fija en casos aislados pueden provocar puntos de presión locales o constricción de vasos sanguíneos o nervios. Por esta razón, si se dan las siguientes circunstancias, deberá consultar al médico encargado de su tratamiento antes de utilizar el producto:

- Afecciones/lesiones cutáneas en la zona de aplicación, especialmente señales de inflamación (acumulación de calor, hinchazón o enrojecimiento excesivos)
- Trastornos circulatorios y sensoriales (por ejemplo en caso de diabetes, venas varicosas)
- Trastornos del drenaje linfático: incluso hinchazones no observables de los tejidos blandos fuera del ámbito de aplicación

En caso de utilizar elementos ajustados, pueden producirse irritaciones en la piel debidas a la estimulación mecánica de la piel (sobre todo por la generación de sudor) o a la composición del material.

Grupo de pacientes previsto

Los profesionales sanitarios, bajo su propia responsabilidad, atenderán a los adultos y niños teniendo en cuenta las dimensiones/tamaños disponibles y las funciones/indicaciones necesarias y siguiendo la información proporcionada por el fabricante.

Recomendaciones de uso

En principio, el vendaje puede emplearse durante todo el día, sin embargo, durante períodos de descanso prolongado (p. ej., al dormir) es recomendable

retirar el vendaje. Es conveniente que sea el propio usuario quien decida el tiempo de empleo. En caso de que se produzcan cambios inesperados, p. ej. un aumento de las molestias, quítese inmediatamente el producto y consulte a su médico o a su establecimiento especializado.

El vendaje es apto para su uso en el agua. Después de utilizar el producto en agua, aclárelo minuciosamente.

Colocación / Retirada

Tenga en cuenta que el producto se deberá colocar por primera vez bajo la supervisión de personal especializado y formado.

- Antes de colocar el vendaje, pegue la cinta suministrada en el centro, en la zona del bolsillo de la varilla. La cinta se pegará en el bolsillo de la varilla por el extremo más ancho, de manera que la apertura del pulgar del vendaje y la cinta quedarán mirando para el mismo lado (fig. 1).
- Coloque el vendaje sobre la mano. Deberá verse el logotipo “E+motion” en el dorso de la mano (fig. 2).
- Cierre la cinta de tal modo que la apertura de la cinta quede posicionada encima del nudillo exterior de la mano (fig. 3).
- Por último, pegue el extremo fino de la cinta en la cinta (fig. 4).
- Al colocar el vendaje, asegúrese de que la varilla quede en la posición correcta. La varilla debe quedar lo más recta posible en el antebrazo.

Para retirarla, abra la cinta. Agarre el vendaje por la cara interior de la mano. Retire el vendaje de la mano, ejerciendo presión sobre el bolsillo interior y la tablilla.

Adaptación de la férula

La tablilla puede adaptarse individualmente a una temperatura de aprox. 200 °C.

Instrucciones de cuidado

Antes de lavar, cerrar los cierres adhesivos y retirar la tablilla articulada. Recomendamos el empleo de una bolsa de lavado. Los suavizantes, las grasas, los aceites, las lociones, las pomadas y los restos de jabón pueden ser perjudiciales para el material o el efecto de Clima Comfort así como provocar irritaciones en la piel.

- Lave el producto a mano, preferiblemente con detergente medi clean, o en modo ropa delicada a 30°C con detergente para ropa delicada sin suavizante.
- No blanquear.
- Secar al aire.
- No planchar.

- No limpiar en seco.



Instrucciones de almacenamiento

Por favor, guardar el producto en lugar seco y protegido del sol.



Composición

Poliamida, poliéster, lana merino, elastodieno

Garantía

La garantía del fabricante se anulará en caso de un empleo no previsto. Deberá tener en cuenta al respecto las indicaciones de seguridad y las instrucciones de este manual.

Eliminación

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.



Su equipo de medi

¡Le desea una rápida recuperación!

En caso de reclamaciones relacionadas con el producto, tales como daños en el tejido de punto o defectos en el ajuste, póngase en contacto directamente con su distribuidor médico. Solo se notificarán al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro los incidentes graves que puedan provocar un deterioro significativo de la salud o la muerte. Los incidentes graves se definen en el artículo 2, n.º 65 del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). La trazabilidad del producto se garantiza con el código UDI UDI.

Manumed active

Finalidade

Manumed active é uma bandagem de compressão para o pulso.

Indicações

Todas as indicações que tornam necessário o apoio do pulso por um reforço ou uma almofada, como, p. ex.:

- Lesões no pulso, por ex., luxações, entorses
- Artrose do pulso
- Tendovaginite
- Sensação de instabilidade

Contra-indicações

Desconhecidas até à data.

Riscos / Efeitos secundários

No caso de os meios auxiliares ficarem muito apertados, é possível que haja compressão ou a constrição local de vasos sanguíneos ou nervos. Por isto, deve consultar o médico assistente nas condições seguintes, antes da aplicação:

- Doenças ou lesões de pele na área de aplicação, particularmente sinais inflamatórios (aquecimento excessivo, inchaço ou vermelhidão)
- Distúrbios sensoriais e circulatórios (p. ex., em caso de diabetes, varizes)
- Distúrbios na drenagem linfática – bem como inchaços pouco visíveis de tecidos moles fora da área de aplicação

Ao utilizar meios auxiliares demasiado apertados, é possível que seja desenvolvida irritação cutânea ou inflamação local da pele resultante do atrito mecânico na pele (especialmente em combinação com a transpiração) ou da composição do material.

Grupo de pacientes previsto

Em função das dimensões/tamanhos disponíveis e das funções/indicações necessárias, os profissionais de saúde fornecem, sob sua responsabilidade, a adultos e crianças sob a observação das informações do fabricante.

Modo de uso

Por norma, a ligadura pode ser utilizada durante todo o dia, mas deve ser retirada em caso de pausas de descanso mais prolongadas (p. ex. para dormir). No entanto, a utilização deve ser feita de acordo com o próprio conforto de utilização. Em caso de alterações inesperadas excessivas, p. ex., dores mais

fortes, por favor retire imediatamente o produto e consulte o seu médico ou a respectiva loja especializada.

A ligadura é adequada para a utilização na água. Por favor, depois, enxague exaustivamente o produto.

Colocar / Retirar

Observe que a primeira colocação deve ser realizada sob a orientação de pessoal especializado com formação.

- Ponha a precinta antes de colocar a ligadura no centro da bolsa da tala. Neste passo, a precinta com a extremidade larga é fixada, de modo a que a abertura do polegar da ligadura e a precinta fiquem viradas para o mesmo lado (Fig. 1).
- Puxe a ligadura sobre a mão Neste caso, o logotipo “E+motion” está visível nas costas da mão (Fig. 2).
- Aperte a precinta de modo a que a abertura existente fique posicionada acima da zona externa dos nós dos dedos (Fig. 3).
- De seguida, fixe a extremidade estreita da precinta à precinta (Fig. 4).
- Certifique-se de que a tala fica bem posicionada ao colocar a ligadura. A tala deve ficar o mais justa possível ao antebraço.

Para retirá-la, abra a precinta. Agarre na ligadura a partir da palma da mão. Efetuando pressão sobre a bolsa interior e a tala, puxe a ligadura, retirando-a da mão.

Ajuste da tala da mão

A tala da mão pode ser ajustada individualmente a cerca de 200 °C de temperatura.

Instruções de lavagem

Os fixadores de gancho e argola têm de estar fechados para a lavagem remover a calha da articulação. Recomendamos a utilização de um saco para roupa. Amaciador, gorduras, óleos, loções, pomadas e resíduos de sabão podem agredir o material, prejudicar o efeito Clima Comfort e causar irritações cutâneas.

- Preferencialmente lave o produto à mão com detergente medi clean ou no programa de lavagem para tecidos delicados a 30°C com detergente suave sem amaciador.
- Não branquear
- Deixar secar ao ar.
- Não engomar.

- Não lavar com produtos químicos.



Conservação

Conserve em ambiente seco e proteja da exposição solar direta.



Composição

Poliamida, poliéster, lã de merino, elastano

Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil do fabricante extingue-se em caso de uso indevido. Neste contexto, observe também as respetivas instruções de segurança e indicações existentes neste manual de instruções.

Eliminação

Pode eliminar o produto pelo lixo doméstico.



A sua equipa medi

Deseja-lhe uma rápida convalescença!

Em caso de reclamações relativas ao produto, como, por exemplo, danos na malha ou imperfeições no ajuste, contacte diretamente o seu fornecedor especializado em produtos médicos. Apenas os incidentes graves que podem provocar uma deterioração significativa do estado de saúde ou a morte devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro. Os incidentes graves estão definidos no artigo 2 n.º 65 do Regulamento (UE) 2017/745 (MDR). A rastreabilidade do produto é garantida com o código UDI UDI.

Manumed active

Scopo

Manumed active è un bendaggio di compressione per il polso.

Indicazioni

Tutte le indicazioni in cui è necessario un sostegno del polso con un rinforzo o pelotta, come p. e.:

- Lesioni al polso, ad es. slogature e distorsioni
- Artrosi al polso
- Tendovaginiti
- Sensazione di instabilità

Controindicazioni

Attualmente non note.

Rischi / Effetti collaterali

Gli indumenti compressivi aderenti possono causare la comparsa sulla cute di segni dovuti alla pressione o provocare una compressione dei vasi sanguigni o dei nervi. Per questo motivo, nelle circostanze riportate di seguito, prima dell'utilizzo è necessario consultare il proprio medico curante:

- Malattie o lesioni della pelle nella zona di applicazione, soprattutto se vi sono segni di infiammazione (riscaldamento eccessivo, gonfiore o arrossamento)
- Disturbi della sensibilità o circolatori (ad es. in caso di diabete, vene varicose)
- Disturbi della circolazione linfatica - possono verificarsi gonfiori ambigui dei tessuti molli anche al di fuori della zona di applicazione

Gli indumenti compressivi aderenti possono causare infiammazioni cutanee locali dovute all'irritazione meccanica della pelle (soprattutto in correlazione con l'aumento della sudorazione) o alla composizione dei materiali.

Gruppo di pazienti previsto

In base alle misure / taglie disponibili e alle funzioni / indicazioni necessarie, i professionisti del settore sanitario assistono sotto la propria responsabilità adulti e bambini tenendo conto delle informazioni del produttore.

Modalità d'uso

In linea di massima, la fasciatura può essere indossata tutto il giorno, ma durante pause di riposo prolungate (ad es., quando si dorme) è opportuno rimuoverla. A tale proposito, basarsi sulle proprie sensazioni durante l'utilizzo. In caso di variazioni inattese ed eccessive, ad es. un'acutizzazione dei disturbi,

rimuovere immediatamente il prodotto e consultare il medico o il rivenditore.

La fasciatura è adatta per essere utilizzata in acqua. Al termine, risciacquarla accuratamente.

Applicazione / rimozione

La prima applicazione dovrebbe avvenire sotto la guida di personale specializzato addestrato.

- Allacciare il cinturino prima di applicare la fasciatura al centro, sulla zona della tasca dell'asta. Durante questa operazione il cinturino con l'estremità larga viene allacciato sulla tasca dell'asta in modo che l'apertura per il pollice della fascia e il cinturino siano sullo stesso lato (fig. 1).
- Tirare la fasciatura sopra la mano. In questo modo la scritta "E+motion" è visibile sul dorso della mano (fig. 2).
- Chiudere il cinturino in modo che l'apertura del cinturino sia posizionata sopra la nocca più esterna (fig. 3).
- Allacciare quindi l'estremità stretta della cinghia sulla cinghia stessa (fig. 4).
- Prestare attenzione, durante l'applicazione della fasciatura, alla corretta posizione dell'asta. L'asta dovrebbe essere il più possibile dritta lungo l'avambraccio.

Per rimuoverla aprire il cinturino. Afferrare la fasciatura dal lato interno della mano. Esercitando una pressione sulla tasca interna e sulla stecca, rimuovere la fasciatura dalla mano.

Adattamento della stecca

La stecca può essere adattata individualmente a una temperatura di ca. 200 °C.

Indicazioni per la manutenzione

Prima del lavaggio, le chiusure a strappo asola-uncino devono essere chiuse e rimuovere le aste dell'imbottitura. Si raccomanda di utilizzare un sacchetto per il lavaggio in lavatrice. Ammorbidenti, grassi, oli, lozioni, pomate e residui di sapone possono danneggiare il materiale, compromettere l'effetto Clima Comfort e causare irritazioni cutanee.

- Lavare il prodotto preferibilmente a mano con detersivo medi clean, oppure con lavaggio delicato a 30 °C con un detersivo delicato senza ammorbidente.
- Non candeggiare.
- Asciugare all'aria.
- Non stirare.
- Non lavare a secco.



Avvertenze per la conservazione

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto dalla luce solare diretta.



Composizione

Poliammide, poliestere, lana merino, elastan

Responsabilità

La responsabilità del produttore decade in caso di utilizzo inappropriato. A questo proposito rispettare le indicazioni di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale per l'uso.

Smaltimento

È possibile smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.



Il Suo team medi

Le augura una pronta guarigione!

In caso di reclami relativi al prodotto, come ad esempio danni al tessuto o carenze nella conformazione, vi invitiamo a rivolgervi direttamente al punto vendita specializzato. Solo gli incidenti gravi, che comportano un grave deterioramento delle condizioni di salute o il decesso del paziente, sono da notificare al fabbricante e alle autorità competenti dello Stato membro. Gli incidenti gravi sono definiti nell'articolo 2 n. 65 del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). La tracciabilità del prodotto è garantita dal codice UDI .

Manumed active

Beoogd doel

De Manumed active is een compressiebandage voor het polsgewricht.

Indicaties

Alle indicaties waarbij een ondersteuning van de pols door versteviging resp. pelotte nodig is, bijv.:

- Letsels van de pols, bijv. verstuikingen, distorsies
- Artrose van de pols
- Tendovaginitis
- Instabiliteitsgevoel

Contra-indicaties

Momenteel niet bekend.

Risico's / Bijwerkingen

Bij strak aangebrachte hulpmiddelen kunnen er plaatselijk drukverschijnselen of beknelling van bloedvaten of zenuwen optreden. Daarom dient u bij de volgende omstandigheden voor de toepassing overleg te plegen met uw behandelend arts:

- Aandoeningen of letsels van de huid in het toepassingsgebied, vooral bij tekenen van ontsteking (te warm, zwelling of roodheid)
- Waarnemings- en doorbloedingsstoornissen (bijv. bij diabetes, spataders)
- Stoornissen van de lymfeafvoer – ook onduidelijke zwellingen van weke delen weg van het toepassingsgebied.

Bij het dragen van strak aangebrachte hulpmiddelen kunnen plaatselijk huidirritaties voorkomen, die te wijten zijn aan een mechanische irritatie van de huid (vooral in combinatie met transpiratie) of aan de samenstelling van het materiaal.

Beoogde patiëntengroep

Hulpverleners gebruiken het product voor volwassenen en kinderen, rekening houdend met de beschikbare maten/groottes, de vereiste functies/indicaties en de informatie van de fabrikant op eigen verantwoording.

Draaginstructies

Principeel kan de bandage de hele dag worden gedragen, tijdens langere rustfasen (bijv. slapen) moet de bandage echter worden uitgetrokken. Dit dient echter volgens het eigen draaggevoel te geschieden.

De bandage is geschikt voor het gebruik in water. Spoel het product daarna echter zorgvuldig uit.

Aantrekken / uittrekken

- Plak de meegeleverde riemband vóór het plaatsen van de bandage in het midden van de spalktunnel. Plak daarbij het brede uiteinde van de riemband op de spalktunnel zodat de duimopening van de bandage en de riemband naar één kant wijzen (afb. 1).
- Trek de bandage over uw hand. De letter 'm' op de handrug is zichtbaar (afb. 2).
- Sluit de riemband zodat de opening erin zich over de buitenste handknokel bevindt (afb. 3).
- Plak vervolgens het smalle uiteinde van de riem op de band (afb. 4).
- Let bij het plaatsen van de bandage op de juiste positie van de spalk. De spalk moet zo recht mogelijk parallel met de onderarm lopen (afb. 5).

Om de riemband te verwijderen, opent u deze. Grijp vanuit de handpalm in de bandage. Druk op de binnenliggende tunnel en de spalk om de bandage van de hand te trekken.

Om de spalk te verwijderen, klapt u het weefsel in het gebied van de magentagekleurde rand om (afb. 6). Door de gleuf in het weefsel kunt u de spalk uit de tunnel schuiven.

Aanpassen van de handspalk

De handspalk kan bij een temperatuur van ca. 200 °C individueel worden aangepast.

Wasinstructies

Gelieve de klittenband voor het wassen te sluiten en de gewrichtsspalk te verwijderen. Wij adviseren het gebruik van een waszak. Wasverzachters, vetten, oliën, lotions, zalven en zeepresten kunnen het materiaal aantasten, het Clima Comfort-effect nadelig beïnvloeden en huidirritaties veroorzaken.

- Was het product bij voorkeur met medi clean wasmiddel met de hand of in de zachte was op 30° met een mild wasmiddel zonder wasverzachter.
- Niet bleken.
- Aan de lucht laten drogen.
- Niet strijken.
- Niet chemisch reinigen.



Bewaarinstructie

Gelieve het product droog te bewaren en te beschermen tegen direct zonlicht.



Materiaalsamenstelling

Polyamide, polyester, merino wol, elastaan

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt bij ondeskundig gebruik. Houd daartoe ook rekening met de desbetreffende veiligheidsinstructies en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

Afvalverwijdering

U kunt het product bij het huishoudelijke afval doen.



Uw medi-team

wenst u snelle genezing!

Bij reclamaties in verband met het product, zoals beschadiging van het weefsel of een verkeerde pasvorm, neemt u rechtstreeks contact op met uw medische vakhandel. Enkel ernstige incidenten, die tot een ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand of tot de dood kunnen leiden, moeten aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat worden gemeld. Ernstige incidenten zijn gedefinieerd in artikel 2, nr. 65 van de Verordening (EU) 2017/745 (MDR). De traceerbaarheid van het product is gegarandeerd door de UDI-code **UDI**.

Manumed active

Informace o účelu použití

Výrobek Manumed active je kompresní bandáž zápěstního kloubu. .

Indikace

Všechny indikace, u nichž je nutná podpora zápěstního kloubu vyztužením nebo pelotou, jako je např.:

- Úrazy zápěstí, např. vymknutí, distorze
- Artróza zápěstí
- Zánět šlachové pochvy
- Pocit nestability

Kontraindikace

V současné době nejsou žádné známy.

Rizika / Vedlejší účinky

V případě pevně utažených pomůcek může dojít k místním otlakům nebo stenóze cév nebo nervů. Proto byste měli za následujících okolností používání konzultovat se svým ošetřujícím lékařem:

- Onemocnění nebo poranění pokožky v oblasti aplikace, především v případě známek zánětu (nadměrné teplo, otok nebo zarudnutí)
- Poruchy citlivosti a prokrvování (např. u diabetu, křečových žil)
- Poruchy odtoku lymfy – rovněž nejednoznačné otoky měkkých tkání po stranách míst aplikace

Při nošení přiléhavých pomůcek může docházet k místnímu podráždění kůže, příp. iritaci, které může být způsobeno mechanickým drážděním pokožky (především společně s pocením) nebo složením materiálu.

Zamýšlená skupina pacientů

Příslušníci zdravotnických profesí ošetřují na základě měř/velikostí, které mají k dispozici a potřebných funkcí/indikací, dospělé a děti se zohledněním informací výrobce ve své odpovědnosti.

Pokyny pro nošení

Zásadně je možné bandáž nosit celodenně, při delších klidových přestávkách (např. při spánku) je vhodné bandáž sejmout. Důležitý je přitom vlastní pocit z nošení.

Bandáž je vhodná i pro použití ve vodě. Následně bandáž důkladně vymáchejte.

Použití / přiložení

Mějte prosím na zřeteli, že první nasazení musí být provedeno s instrukcemi zaškoleného odborného personálu.

- Před přiložením bandáže upevněte přiložený popruh pomocí suchého zipu doprostřed kapsy na dlahu. Přitom se popruh upevní na kapsu na dlahu širokým koncem tak, aby otvor na palec v bandáži a popruh ukazoval na jednu stranu (obr. 1).
- Natáhněte bandáž na ruku. Na hřbetu ruky by přitom měl být vidět nápis „E+motion“ (obr. 2).
- Zapněte popruh tak, aby byl otvor v popruhu umístěn nad vnějšími klouby (obr. 3).
- Pak připněte suchý zip úzkého konce na popruh (obr. 4).
- Při přikládání bandáže dejte pozor na správnou polohu dlahy. Dlahy by měla směřovat pokud možno rovně k předloktí.

Pro sejmutí rozepte popruh. Sáhnete do bandáže zevnitř z dlaně. Tlakem na vnitřní kapsu a dlahu stáhněte bandáž z ruky.

Přízpůsobení dlahy

Dlahu lze při teplotě ca. 200 °C individuálně přizpůsobit.

Pokyny k praní

Před praním uzavřete pásky na suchý zip a odstraňte dlahy kloubu. Doporučujeme použití pracího pytlíku. Aviváže, tuky, oleje, tělová mléka, masti a zbytky mýdel mohou způsobovat narušení materiálu, negativně ovlivňovat efekt Clima Comfort a vyvolávat podráždění pokožky.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.



Pokyny pro skladování

Výrobek skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.



Složení materiálu

Polyamid, polyester, merinová vlna, elastan

Ručení

Ručení výrobce zaniká při nesprávném používání. Dodržujte také příslušné bezpečnostní pokyny a instrukce v tomto návodu k používání.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

**Váš medi Team**

Vám přeje rychlé uzdravení!

V případě reklamací v souvislosti s výrobkem, jako je například poškození úpletu nebo vady přiléhavosti, se prosím obraťte přímo na svého specializovaného prodejce zdravotnických prostředků. Pouze závažné nežádoucí příhody, které mohou vést ke značnému zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu. Závažné nežádoucí příhody jsou definovány ve článku 2 č. 65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR). Zpětná vysledovatelnost výrobku je zaručena kódem UDI UDI.

Manumed active

Назначение

Manumed active представляет собой давящую повязку для лучезапястного сустава.

Показания

Все показания, при которых необходима опора запястья с помощью усиления или пелота, такие как, напр.:

- Травмы запястного сустава, напр., вывихи, растяжения
- Артроз запястного сустава
- Тендовагинит
- Ощущение нестабильности

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Риски / Побочные эффекты

При плотном прилегании вспомогательных средств может произойти местное сдавливание или сужение кровяных сосудов или нервов.

Поэтому обязательно консультируйтесь со своим лечащим врачом при следующих обстоятельствах:

- Заболевания или повреждения кожи в области применения, прежде всего при воспалительных симптомах (сильный нагрев, опухание или покраснение)
- Нарушение чувствительности и кровообращения (например при диабете, расширении вен)
- Нарушения лимфооттока – а также неоднозначные опухания мягких тканей за пределами области применения

Ношение тесно прилегающих вспомогательных средств может привести к появлению местных раздражений кожи, причиной которых может быть механическое раздражение кожи (прежде всего в сочетании с потоотделением) или состав материала.

Предусмотренная группа пациентов

Представители медицинских профессий под собственную ответственность на основании доступных мер/величин и необходимых функций/показаний оказывают медицинскую помощь взрослым и детям с учетом информации производителя.

указания по применению

Наибольшая эффективность бандажа достигается при физической

активности. Использовать бандаж можно в течение всего дня. Длительность использования в течение дня зависит от ощущения комфорта.

Бандаж можно также использовать в воде. После этого тщательно сполосните изделие.

Рекомендации по надеванию

Обратите внимание: в первый раз надевать изделие следует под наблюдением квалифицированного специалиста, который прошел соответствующее обучение.

- Перед надеванием бандажа прикрепите прилагаемый ремешок с помощью липучки посередине в области кармана для шины. Широкий конец ремешка необходимо прикрепить к карману для шины таким образом, чтобы отверстие для большого пальца в бандаже и ремешок были направлены в одну сторону (рис. 1).
- Наденьте бандаж на руку. Надпись «E+motion» должна быть на тыльной стороне ладони (рис. 2).
- Застегните ремешок так, чтобы отверстие в нем находилось над наружной областью запястья (рис. 3).
- Затем пристегните узкий конец ремешка к самому ремешку (рис. 4).
- При надевании бандажа проследите, чтобы шина была расположена правильно. Шина по возможности должна пролегать по прямой линии относительно предплечья.

Для снятия расстегните ремешок. Возьмитесь за бандаж с внутренней стороны ладони. Нажимая на расположенный внутри карман и шину, снимите бандаж с руки.

Моделирование шины для запястья

Шина для запястья моделируется при нагревании до температуры около 200°C.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Мы рекомендуем использовать мешок для белья. Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства med clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.

- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.



Материалы

Полиамид, Полиэстер, меринос, эластан

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Manumed active

Przeznaczenie

Manumed active jest stabilizatorem kompresyjnym nadgarstka.

Wskazania

Wszystkie zalecenia, w których wymagane jest podparcie nadgarstka przez wzmocnienie lub podkładkę, np.:

- Urazy nadgarstka, np. zwichnięcia, skręcenia
- Artroza nadgarstka
- Zapalenie pochewki ścięgnowej
- Poczucie niestabilności

Przeciwwskazania

W chwili obecnej nie znane.

Zagrożenia / Skutki uboczne

W przypadku ciasno przylegających środków pomocniczych może dojść do miejscowych objawów ucisku lub ściśnięć naczyń krwionośnych lub nerwów. Dlatego przed użyciem ortozy należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie w razie następujących dolegliwości:

- Choroby lub uszkodzenia skóry w miejscu stosowania, przede wszystkim przy objawach zapalenia (nadmierne ocieplenie, obrzęk lub zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i ukrwienia nóg (np. przy cukrzycy, żylakach)
- Zaburzenia chłonki – jak również niejednoznaczne obrzęki miękkich części poza obszarem stosowania

W przypadku noszenia ciasno przylegających środków pomocniczych może dojść do miejscowych podrażnień skóry, wynikających z mechanicznego uszkodzenia skóry (przede wszystkim w związku z potliwością) lub składu materiałowego.

Docelowa grupa pacjentów

Pracownicy służby zdrowia opatrują osoby dorosłe i dzieci na własną odpowiedzialność, kierując się dostępnością konkretnych rozmiarów/wielkości oraz niezbędnymi funkcjami/wskazaniami, uwzględniając przy tym informacje udzielone przez producenta.

Wskazówki dotyczące noszenia

Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień. Przy dłuższych okresach odpoczynku (podczas snu) należy ściągnąć opaskę. Decyzję o tym

należy jednak podjąć na podstawie własnych odczuć podczas noszenia. Jeżeli wystąpiłyby jakieś nieoczekiwane, nadmierne zmiany np. nasilenie się dolegliwości, należy produkt natychmiast zdjąć i skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie lub sklepem specjalistycznym.

Opaska nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać

Zakładanie / zdejmowanie

Pierwsze zakładanie ortozy powinno odbyć się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu specjalistycznego.

- Przed założeniem bandaża naklej dołączoną taśmę elastyczną na środku kieszeni na szyny. Naklej przy tym szerszy koniec taśmy elastycznej na kieszeń na szyny tak, aby otwór na kciuk w bandażu i taśma elastyczna były skierowane w jedną stronę (rys. 1).
- Naciągnij bandaż na dłoń. Logo „E+motion” jest przy tym widoczne na grzbiecie dłoni (rys. 2).
- Zamknij taśmę elastyczną tak, aby otwór w niej znajdował się nad zewnętrzną kostką dłoni (rys. 3).
- Następnie naklej wąski koniec taśmy na taśmę (rys. 4).
- Podczas zakładania bandaża zwróć uwagę, aby szyna była właściwie umieszczona. Szyna powinna być ułożona w miarę możliwości prosto do przedramienia.

Aby zdjąć, należy otworzyć taśmę elastyczną. Z wewnętrznej części dłoni sięgnij do bandaża. Ściągnij bandaż z dłoni, dociskając wewnętrzną kieszeń i szynę.

Dopasowanie szyny nadgarstkowej

Szynę nadgarstkową można indywidualnie uformować w temperaturze około 200 °C.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Zalecamy stosowanie woreczka do prania. Płyny do płukania tkanin, smary, oleje, lotony, maści i resztki mydła mogą uszkodzić materiał, zaburzyć efekt Clima Comfort i wywołać podrażnienia skóry.

- Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczonego.
- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.

- Nie czyścić chemicznie.



Przechowywanie

Produktów należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.



Skład

Poliamide, poliester, merynosowa, elastan

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność producenta wygasa w przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Należy również uwzględnić odnośne wskazówki bezpieczeństwa i informacje zawarte w niniejszej instrukcji eksploatacji.

Utylizacja

Produkt można zutylizować z odpadami z gospodarstwa domowego.



Pracownicy firmy medi

Życzą szybkiego powrotu do zdrowia!

W przypadku reklamacji w związku z produktem, na przykład uszkodzenia dzianiny lub niewłaściwego dopasowania, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim sprzedawcą sprzętu medycznego. Producentowi i odpowiednim władzom kraju członkowskiego należy zgłaszać jedynie poważne incydenty, które mogą doprowadzić do znaczącego pogorszenia stanu zdrowia lub do śmierci. Poważne incydenty zdefiniowano w artykule 2 pkt. 65 rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Identyfikowalność produktu jest gwarantowana za pośrednictwem kodu UDI UDI.

Manumed active

Призначення

Manumed active — це бандаж для зап'ястка із стабілізуючою пластиною.

Показання

Будь-які показання, що потребують підтримку зап'ястя з використанням підсилення чи подушечки, наприклад:

- Травми зап'ястя, наприклад, вивихи, розтягнення
- Артроз зап'ястя
- Тендовагініт
- Відчуття нестабільності

Протипоказання

На даний момент невідомі.

Ризики / побічні ефекти

Однак при занадто тісному приляганні допоміжних засобів в окремих випадках можуть виникати локальні прояви надмірного тиску, звуження судин чи затискання нервів. Тому наполегливо радимо звернутися до лікаря, який вас лікує, за наступних обставин:

- При захворюванні чи пошкодженні шкіри в місці застосування виробу, перш за все за наявності ознак запального процесу (підвищення температури, набряку чи почервоніння)
- При зміні чутливості та порушеннях кровообігу (наприклад, при діабеті, варикозному розширенні вен)
- При порушеннях відтоку лімфи, а також слабо вираженому набряку м'яких тканин навколо місця застосування

Під час носіння щільно прилягаючих засобів можуть виникати місцеві роздратування або подразнення шкіри, які можуть бути пов'язані з механічним подразненням шкіри (особливо у зв'язку з пітливістю) або зі складом матеріалу.

Передбаченій групі пацієнтів

медичні працівники надають допомогу дорослим та дітям виходячи з наявних розмірів та необхідних функцій/показань відповідно до сфери своїй відповідальності, враховуючи інформацію виробника.

Вказівка щодо носіння

В принципі, бандаж можна носити цілий день, проте під час періодів тривалого відпочинку (наприклад, під час сну) бандаж потрібно знімати.

Проте використання бандажу здебільшого повинно орієнтуватись на власні відчуття, які виникають в процесі носіння. У разі неочікуваних, надмірних змін чи посилення неприємних відчуттів негайно зніміть виріб та зверніться до лікаря чи до спеціального магазину, у якому ви придбали виріб.

Бандаж також можна використовувати у воді. Після цього бандаж слід ретельно прополоскати.

Одягання та знімання

Зверніть увагу: вперше надягати виріб слід під наглядом кваліфікованого спеціаліста, який пройшов відповідне навчання.

- Перед надяганням бандажа прикріпіть ремінець, що входить у комплект, посередині в області кишені для шини. Широкий кінець ремінця слід прикріпити до кишені для шини за допомогою липучки таким чином, щоб отвір для великого пальця в бандажі та ремінець були розташовані в одному напрямку (мал. 1).
- Натягніть бандаж на руку. Напис «E+motion» повинен бути на зворотній стороні долоні (мал. 2).
- Застебніть ремінець так, щоб отвір у ньому був розташований над зовнішньою частиною зап'ястка (мал. 3).
- Потім пристебніть вузький кінець ремінця до самого ремінця (мал. 4).
- При надяганні бандажа зважайте на правильне положення шини. Шина повинна бути спрямована по можливості по прямій лінії відносно передпліччя.

Для зняття розстебніть ремінець. Візьміться за бандаж із внутрішньої сторони долоні. Натискаючи на розташовану всередині кишеню та шину, зніміть бандаж із руки.

Регулювання ручної шини

Ручну шину можна відрегулювати відносно індивідуальних анатомічних особливостей користувача при температурі біля 200°C.

Вказівки щодо догляду

Перед пранням застебніть липучки та дістаньте шини з шарнірами. Ми рекомендуємо використовувати мішок для білизни. Ополіскувачі, жири, масла, лосьйони, мазі та залишки мила можуть негативно вплинути на властивості матеріалу, порушити ефект Clima Comfort і призвести до подразнення шкіри.

- Періть виріб вручну, бажано з використанням засобу medi clean. Також можливе прання у пральній машині у щадному режимі при температурі

Українська

30° C з додаванням м'якого миючого засобу без пом'якшувача для тканин.

- Не відбілювати.
- Сушити виріб слід на повітрі.
- Не прасувати.
- Не здавати у хімчистку.



Зберігання

Зберігайте виріб в сухому місці, захищайте його від прямого сонячного проміння.



Склад матеріалу

Поліамід, поліестер, меринос, спандекс

Відповідальність

Виробник звільняється від відповідальності при використанні виробу не за призначенням. Дотримуйтеся вказівок щодо безпеки та настанов, наведених у цій інструкції.


Утилізація

Виріб можна утилізувати разом з побутовими відходами.



Команда medi

бажає Вам швидкого
о видужання!

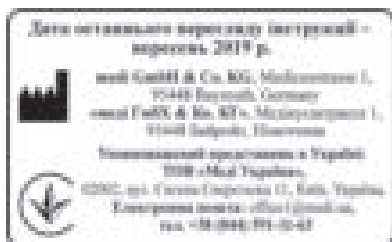

- لا تستعمل المبيّض.
- اتركه ليحفظ طبيعياً.
- لا تكوه.
- لا تلجأ إلى التنظيف الكيميائي.



تعليمات التخزين

يحفظ في درجة حرارة الغرفة وفي مكان جاف. يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.



تكوين المواد

بولي أميد، بوليستر، ميرينو، إيلاستان

المسؤولية

تصبح مسؤولية المصنّع لاغية في حال استخدام المنتج لغير الغرض المعد له. يرجى الرجوع إلى معلومات وتعليمات السلامة الواردة في هذا الدليل.



التخلص من المنتج

يمكنك التخلص من المنتج برميّه في سلة المهملات المنزلية.

فريق medi

يتمنى لك الشفاء العاجل!

ملاحظات حول ارتداء المشد

ومن حيث المبدأ، يمكن ارتداء الرباط طوال اليوم، ولكن ينبغي خلعه خلال فترات الاستراحة الطويلة (مثل: النوم) ولكن يعتمد ذلك على مدى شعورك بالراحة أثناء ارتدائه. في حال حدوث تغيرات مفاجئة وغير متوقعة، مثل زيادة الأعراض، فيرجى خلع المنتج على الفور والتواصل مع طبيبك أو المتجر المختص.

يمكن استخدام الرباط في المياه. وبعد استخدامه، يرجى غسله جيداً.

الارتداء / الخلع

- يرجى الانتباه إلى أنه يجب ارتداء الرباط لأول مرة تحت إشراف طبيب مختص.
- ثبت الحزام المتاح قبل وضع الرباط وسط جيب القضيبي الداعم. وينبغي هنا تثبيت الطرف العريض من الحزام على جيب القضيبي الداعم بحيث يشير ثقب الإبهام في الرباط والحزام إلى الاتجاه ذاته (الشكل 1).
- اسحب الرباط فوق اليد. وهنا، يجب أن يكون شعار «E+Motion» على ظهر اليد (الشكل 2).
- أغلق الحزام بحيث تكون فتحة الحزام فوق عظمة اليد الخارجية (الشكل 3).
- ثم ثبت طرف الحزام الرفيع فوق الحزام (الشكل 4).
- تأكد من وضع القضيبي الداعم بشكل صحيح عند وضع الرباط بحيث يكون القضيبي مستقيماً بأقصى قدر ممكن باتجاه الساعد.

لإزالة الرباط، افتح الحزام. ادفع كف يدك خارج الرباط. اضغط على الجيب الداخلي والقضيبي واسحب الرباط من يدك.

تعديل صفيحة اليد

يمكن تعديل الصفيحة الخاصة باليد حسب الرغبة عند درجة حرارة تصل إلى حوالي ٢٠٠ ° مئوية.

تعليمات العناية

- يرجى إغلاق لواصق الأهداب والخطاطيف قبل الغسل. نوصي باستخدام شبكة غسيل. تجنب إزالة الصفيحة قبل الغسل. يمكن أن تؤدي بقايا منعّمات الأقمشة والدهون والزيوت والكريمات والمراهم والصابون إلى تلف المواد، وتعطل خاصية Clima Comfort وتسبب التهيجات.
- يمكنك غسل المنتج يدوياً، ويفضل استخدام إحدى منظفات medi، أو في دورة غسل الملابس الناعمة عند درجة حرارة ٣٠ ° مئوية باستخدام منظف لطيف على الأقمشة لا يحتوي على منعّمات الأقمشة.

Manumed active

غرض الاستعمال

Manumed active هو رباط ضاغط للرسغ.

مجالات الاستخدام

كافة دواعي الاستعمال التي يكون فيها تدعيم الرسغ من خلال أداة للتقوية و/ أو لبادة ضرورياً، مثل:

- الإصابات في الرسغ، مثل: الالتواءات، التشوهات
- التهاب مفصل الرسغ
- التهاب الوتر والغمدة
- الشعور بعدم استقرار المفصل

موانع الاستعمال

غير معروفة إلى الآن.

المخاطر / الأعراض الجانبية

إذا كان المنتج الداعم ضيقاً جداً، فقد يؤدي هذا إلى آثار ناتجة عن الضغوط الموضعية أو إلى انقباضات في الأوعية الدموية أو الأعصاب. وعليه، يجب أن تستشير طبيبك في الحالات التالية قبل استخدام المنتج:

- الأمراض الجلدية أو الإصابات في منطقة الاستعمال، سيما التي ترافقها أعراض الالتهابات (الارتفاع المفرط في درجة الحرارة، أو التورم، أو الاحمرار).
- الحساسية أو المشكلات في التروية (مثل حالات السكري والدوالي)
- اضطرابات التدفق الليمفاوي - فضلاً عن تورم الأنسجة اللينة غير المشخص، وبصرف النظر عن مجال الاستخدام
- يمكن أن يتسبب تضيق المنتج بتهييج موضعي في الجلد، ما يؤدي إلى حكة (سيما بسبب التعرق) أو إلى تلف المواد المصنعة.

فئات المرضى المستهدفين

يقدم الطاقم الطبي على مسؤوليته الخاصة رعاية للبالغين والأطفال بناء على الأبعاد/ الأحجام المتوفرة والوظائف/ دواعي الاستعمال الضرورية، مع مراعاة معلومات الشركة المصنعة.

Manumed active

Informácia o účele použitia

Manumed active je kompresná bandáž zápästia.

Indikácie

Všetky indikácie, pri ktorých je potrebná opora zápästia zosilnením resp. pelotou, ako napr.:

- Zranenia zápästia, napr. podvrtnutia, distorzie
- Artróza zápästia
- Tendovaginitída
- Pocit instability

Kontraindikácie

V súčasnosti nie sú známe.

Riziká / Vedľajšie účinky

Pri tesne priliehajúcich pomôckach môže dochádzať k lokálnym otlačeniam alebo k zúženiu krvných ciev alebo nervov. Preto by ste sa za nasledujúcich okolností mali pred použitím poradiť s Vaším ošetrovujúcim lekárom:

- Ochorenia alebo poranenia kože v oblasti aplikácie, predovšetkým pri zápalových príznakoch (nadmerné zahriatie, opuch alebo začervenanie)
- Poruchy citlivosti a prekrvenia (napr. pri diabete, kŕčových žilách)
- Poruchy odtoku lymfy – rovnako nejednoznačné opuchy mäkkých častí mimo oblasti aplikácie

Pri nosení tesne priliehajúcich pomôcok môže dôjsť k lokálnym podráždeniam kože resp. iritáciám, ktoré súvisia s mechanickým dráždením kože (predovšetkým v spojení s potením) alebo so zložením materiálu.

Určená skupina pacientov

Príslušníci zdravotníckych povolání podľa svojich kompetencií ošetrí dospelých a deti na základe dostupných rozmerov/veľkostí a potrebných funkcií/indikácií, pričom zohľadnia pokyny výrobcu.

Pokyny na nosenie

Zásadne možno bandáž nosiť celodenne, počas dlhších prestávok (napr. pri spaní) by sa mala bandáž sňať. Rozhodujúci je však vlastný pocit z nosenia. Pokiaľ by sa počas nosenia vyskytli neočakávané, nadmerné zmeny, napríklad zhoršenie ťažkostí, výrobok okamžite odložte a skontaktujte sa so svojím lekárom alebo s odborným predajcom.

Bandáž je vhodná aj na použitie vo vode. Následne bandáž dôkladne vyplákejte.

Natiahnutie/odloženie

Dbajte prosím na to, že prvý krát by sa priloženie malo uskutočniť pod dohľadom školeného odborného personálu.

- Pred priložením bandáže uzavrite priložený pás suchým zipsom v strede oblasti tyčkového vrečka. Pritom sa pás so širokým koncom pripevní suchým zipsom na tyčkové vrečko, tak aby otvor bandáže pre palec a pás smerovali na jednu stranu (obr. 1).
- Natiahnite si bandáž na ruku. Pritom je vidieť „E+motion“ na chrbte ruky (obr. 2).
- Pás uzavrite tak, aby sa otvor v páse nachádzal nad vonkajšími hánkami (obr. 3).
- Suchým zipsom potom pripnite úzky koniec pásu na popruh (obr. 4).
- Pri priložení bandáže dbajte na správnu pozíciu tyčiek. Tyčka by mala prebiehať podľa možnosti rovno k predlaktiu.

Pri snímaní otvorte pás. Siahnite do bandáže zo strany dlane. Tlakom na vnútorné vrečko a na dlahu stiahnite bandáž z ruky.

Prispôsobenie dlahy

Dlaha sa dá pri teplote cca 200 °C individuálne prispôbiť.

Pokyny na ošetrovanie

Suché zipsy pred praním zatvorte. Odporúčame použitie pracieho vrečka. Odstráňte kľbové dlahy. Aviváže, tuky, oleje, emulzie, masti a zvyšky mydla sa môžu dostať do kontaktu s materiálom, môžu poškodiť efekt regulujúci teplotu Clima Comfort a vyvolať podráždenie pokožky.

- Výrobok perte ručne, najlepšie pracím prostriedkom medi clean, alebo v práčke šetrným pracím programom pri 30 °C s jemným pracím prostriedkom bez aviváže.
- Nebielte.
- Sušte na vzduchu.
- Nežehlite.
- Nečistite chemicky.



Pokyny na skladovanie

Ortému skladujte v suchu a chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Materiálové zloženie

Polyamidu, polyester, merino, elastanu

Ručenie

Ručenie výrobcu zaniká pri používaní, ktoré nezodpovedá určenému účelu. Dodržiavajte pritom aj príslušné bezpečnostné upozornenia a pokyny v tomto návode na použitie.

Likvidácia

Výrobok môžete zlikvidovať ako domový odpad.



Váš tím medi

vám želá rýchle uzdravenie!

V prípade reklamácií súvisiacich s produktom, ako napríklad poškodenia pleteniny alebo nedostatky vytvarovania, sa prosím obráťte priamo na Vašu špecializovanú predajňu so zdravotníckymi pomôckami. Výrobcom a príslušnému orgánu členského štátu sa musia hlásiť len závažné nehody, ktoré môžu viesť k podstatnému zhoršeniu zdravotného stavu alebo k smrti. Závažné nehody sú definované v článku 2 č. 65 Nariadenia (EU) 2017/745 (MDR). Spätná sledovateľnosť produktu je zabezpečená kódom UDI **UDI**.

Manumed active

Destinația utilizării

Manumed active este un bandaj de compresie pentru articulația mâinii.

Indicații

Toate indicațiile la care este necesară sprijinirea articulației cu o rigidizare, ca de ex. pelotă:

- Vătămări ale articulației mâinii, de ex. entorse, distorsiuni
- Artroza articulației mâinii
- Tendovaginită
- Senzație de instabilitate

Contraindicații

Nu sunt cunoscute până în prezent.

Riscuri / Efecte secundare

Atunci când anumite elemente de susținere sunt aplicate prea strâns, pot să apară fenomene locale de compresie sau constricție a vaselor de sânge ori a nervilor. De aceea recomandăm ca în circumstanțele prezentate mai jos să vă consultați cu medicul dumneavoastră curant înainte de utilizare:

- În cazul în care prezentați boli de piele sau răni în zona de aplicare, în special dacă apar simptome inflamatorii (încălzire excesivă, umflare sau înroșire)
- Perturbări de sensibilitate sau de irigare (de ex. la diabet, varice)
- Perturbări ale drenării limfei – de asemenea tumefacții inexplicabile ale părților moi în afara zonei de aplicare a ortezei

La purtarea unor elemente de susținere aplicate prea strâns, se pot produce iritații ale pielii sau iritații, cauzate de iritări mecanice ale pielii (mai ales în combinație cu transpirația) sau de compoziția materialelor.

Grupe de pacienți prevăzute

Angajații în activități de îngrijirea sănătății tratează pe proprie răspundere adulți și copii, pe baza dimensiunilor/mărimilor disponibile și a funcțiilor/indicațiilor necesare, prin considerarea informațiilor producătorului.

Instrucțiuni de folosire

În principiu, bandajul poate fi purtat pe tot parcursul zilei, totuși în perioadele de repaus prelungit (de ex. dormit) se recomandă scoaterea bandajului. Dar acest lucru trebuie să se realizeze după senzația proprie de purtare. În cazul schimbărilor exagerate, neașteptate, de ex. amplificarea durerilor, scoateți imediat produsul și luați legătura cu doctorul sau magazinul de specialitate.

Bandajul poate fi folosit și în apă. Vă rugăm, după aceea să clătiți produsul temeinic.

Aplicarea / Înlăturarea

Recomandăm ca prima aplicare să se facă sub îndrumarea unui personal calificat.

- Înainte de aplicarea bandajului, prindeți banda curelei atașată pe mijloc în arici în zona tecii baghetei. La această operație banda curelei se prinde în arici cu capătul lat la teaca baghetei, astfel încât deschiderea degetului mare a bandajului și banda curelei să fie orientate spre o parte (fig. 1).
- Strângeți bandajul peste mână. La această operație trebuie să devină vizibilă inscripția „E+motion” pe extradosul mâinii (fig. 2).
- Închideți banda curelei astfel încât deschiderea din banda curelei să fie poziționată deasupra articulațiilor exterioare ale degetelor (fig. 3).
- După care prindeți în arici capătul îngust al curelei pe curea (fig. 4).
- Atenție la aplicarea bandajului la poziția corectă a baghetei. Bagheta trebuie să fie pozată pe cât posibil dreaptă la antebraț.

Pentru îndepărtare deschideți banda curelei. Apucați bandajul de la fața interioară a mâinii. Apăsând buzunarul așezat în interior și șina trageți bandajul cu mâna.

Adaptarea șinei pentru mână

Șina pentru mână se poate adapta individual la o temperatură de cca. 200 °C.

Instrucțiuni de întreținere

Închideți toate îmbinările tip scări înainte de spălare. Recomandăm utilizarea unui sac pentru spălat rufe sensibile. Agenții de înmuiere textile, vaselinele, uleiurile, loțiunile și cremele pot ataca materialul și pot influența negativ efectul Clima Comfort. Resturile de săpun pot provoca iritații ale pielii și genera uzura materialului.

- Pentru spălarea produsului, folosiți cu precădere detergent medi clean, spălați-l manual sau cu mașina de spălat la program delicat de spălare la 30°C, utilizând un detergent neagresiv și fără agent de afânare.
- Nu folosiți înălbitor.
- Uscați în mod natural la aer.
- Nu-l călcați.
- Nu-l curățați chimic.

Instrucțiuni de depozitare

Păstrați orteza într-un loc uscat și ferit de razele directe ale soarelui.



Compoziția materialului

Poliamidă, poliester, merino, elastan

Garanția

Responsabilitatea producătorului se anulează în cazul utilizării neconforme cu destinația. Respectați pentru aceasta indicațiile de siguranță corespunzătoare precum și indicațiile din prezentele Instrucțiuni de utilizare.

Eliminare deșeu

Eliminarea produsului se poate face în regim de deșeu menajer.



Echipa medi

vă urează însănătoșire grabnică!

În cazul reclamațiilor în legătură cu produsul, ca de exemplu deteriorări ale tricotului sau defecte în formatul adaptabil, vă rugăm să vă adresați direct furnizorului dumneavoastră comercial de specialitate pentru dispozitive medicale. Numai incidentele grave, care pot cauza deteriorarea gravă a stării de sănătate sau decesul trebuie anunțate la producător și la autoritatea competentă din statul membru. Evenimentele grave sunt definite în Articolul 2 Nr. 65 al Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR). Trasabilitatea a produsului este garantată prin codul UDI UDI.

מרכיבים

פוליאמיד, פוליאסטר, מרינו, אלסטן

אחריות

במקרה של שימוש שלא למטרה לה מיועד המכשיר מתבטלת אחריות היצרן. יש לשים לב להוראות הבטיחות, ולהוראות המפורטות בהוראות שימוש אלו.



סילוק

ניתן לסלק את המוצר באשפה הביתית.

צוות medi

מאחל החלמה מהירה!

בעלי הכשרה מתאימה.

- לפני לבישת החגורה יש לחבר בסקופ' את רצועת החגורה המצורפת באמצע על גבי אזור כיס מוט התמיכה. כך יש לחבר בסקופ' את רצועת החגורה בקצה הרחב שלה על גבי כיס מוט התמיכה, כך שפתח הבוהן של החגורה, ורצועת החגורה, פונים כלפי צד אחד (איור 1).
- למשוך את החגורה מעל כף היד, כך שניתן לראות את הכיתוב "E+motion" על גבי גב כף היד (איור 2).
- יש לסגור את רצועת החגורה כך שהפתח ברצועת החגורה ממוקם מעל לעצם העדשה החיצונית (איור 3).
- ובהמשך יש לחבר בסקופ' את קצה הרצועה הצר על גבי הרצועה (איור 4).
- בעת לבישת החגורה יש לשים לב למיקום נכון של המוט. ככל שאפשר יעבור המוט ישר מול האמה.

להסרה יש לפתוח את רצועת החגורה. יש להכניס את כף היד דרך הצד הפנימי של כף היד אל תוך החגורה. באמצעות לחץ על גבי הכיס הפנימי ועל הסד ניתן למשוך את החגורה מכף היד.

התאמת סד כף היד

ניתן להתאים את סד כף היד באופן אישי בטמפרטורה של כ-200 מעלות צלסיוס.

הוראות טיפול

- לסגור את סוגרי הסקופ' לפני הכביסה. אנו ממליצים להשתמש ברשת כביסה. יש להסיר את הסד לפני הכביסה. מרככים, שומנים, שמנים, תחליבים, משחות ושאריות סבון עלולים להתקף את החומר, לפגוע בפעולת ה-Clima Comfort, ולגרם לגירוי עור.
- לכבס את החגורה ידנית, אם אפשר בסבון medi clean, או בתוכנית לכביסה עדינה ב-30 מעלות צלסיוס, עם סבון לכביסה עדינה, ללא מרכך.
- לא להלבין.
- לייבש באוויר.
- לא לגהץ.
- לא לנקות ניקוי כימי.



הוראה לאחסון

לאחסן בטמפרטורת החדר ובמקום יבש. להגן בפני קרינת שמש ישירה, ולחות.



Manumed active

מטרה

Manumed active הינה חגורת לחץ לטיפול בפרק כף היד.

התוויות

- כל ההתוויות בהן יש צורך בתמיכה בפרק כף היד באמצעות חיזוק או רפידה, כגון:
- פגיעות בפרק כף היד, כגון נקעים, עיוותים
- מפרקי שורש כף היד
- דלקת מעטפת הגידים (טנוסינוביטיס)
- תחושת חוסר יציבות

התוויות נגד

נכון להיום, לא ידוע על תופעות לוואי.

סיכונים/תופעות לוואי

- עזרים הדוקים מדי עלולים לגרום להיווצרות לחץ מקומי או כיווץ בכלי דם או עצבים. לכן במקרים הבאים יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני השימוש:
- מחלות או פגיעות בעור באיזור השימוש, במיוחד עם סימנים דלקתיים (התחממות יתר, נפחות, או אדמומיות)
- הפרעות בתחושה ובמחזור הדם (כגון במצבי סוכרת, דליות)
- הפרעות בניקוז הלימפה – כמו גם נפיחויות לא מוגדרות ברקמות רכות מחוץ לאזור השימוש
- עזרים הדוקים מדי עלולים לגרום לגירוי או דלקת מקומית בעור כתוצאה מגירוי מכני של העור (במיוחד בשילוב עם זיעה) או בגלל הרכב החומרים.

קבוצת מטופלים מיועדת

אנשי מקצוע בתחום הבריאות יספקו טיפול למבוגרים ולילדים בהתאם לאחריותם, תוך התחשבות במידע המסופק על ידי היצרן, בהתבסס על המידות/הגדלים הזמינים והפונקציות/ההתוויות הדרושות.

הערות לבישה

עקרונית ניתן ללבוש עם החגורה במהלך כל היום, אך יש להסיר אותה למשך זמני מנוחה ארוכים (כגון שינה). עם זאת, יש לעשות זאת על פי ההרגשה. במקרה של שינויים משמעותיים בלתי צפויים, או תחושת אי נעימות גוברת, יש להסיר את המוצר מיידית, וליצור קשר עם הרופא או עם חנות האורתופדיה.

החגורה מיועדת גם לשימוש במים. לאחר מכן יש לשטוף את המוצר שטיפה יסודית.

לבישה / הסרה

יש לשים לב, כי ההתאמה הראשונית חייבת להתבצע על פי הנחיות אנשי מקצוע

Важные замечания

Данное медицинское изделие [MD] предназначено для использования только одним пациентом (1). В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации Вашего врача.

Ważne wskazówki

Produkt medyczny [MD] jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania w przypadku jednego pacjenta (1). W przypadku stosowania produktu do leczenia więcej niż jednego pacjenta wygasa odpowiedzialność producenta za produkt. W razie wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia w trakcie noszenia produkt należy natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem lub technikiem ortopedycznym. Nie nosić produktu na otwartych ranach i zakładać go tylko po uprzednim uzyskaniu instrukcji medycznej.

Важливі вказівки

Цей медичний виріб [MD] призначений тільки для використання одним пацієнтом (1). У разі використання виробу більше, ніж одним пацієнтом гарантії виробника втрачають силу. Якщо при користуванні виробом у Вас виникли біль або неприємні відчуття, будь ласка, негайно зніміть його і проконсультуйтеся у лікаря. Не носіть виріб при наявності відкритих ран. Застосовуйте виріб тільки відповідно до рекомендації лікаря.

ملاحظات هامة

صنع هذا المنتج الطبي [MD] لعلاج مريض واحد فقط (1). في حال استخدامه لعلاج عدة مرضى تصبح مسؤولية الشركة المصنعة عن المنتجات غير سارية وفقاً لقانون الأجهزة الطبية. عند الشعور بألم غير معروف سببه أو عدم الارتياح أثناء ارتداء المنتج، يرجى استشارة طبيبك أو أخصائي الأطراف الصناعية على الفور. لا ترتد المنتج على الجروح المفتوحة واستخدمه وفقاً للتعليمات الطبية فقط.

Dôležité upozornenia

Zdravotnícka pomôcka [MD] je určená len pre použitie u jedného pacienta (1). Ak sa použije na ošetrovanie viac ako jedného pacienta, zaniká záruka výrobcu. Pokiaľ by sa počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom alebo ortopedickým technikom. Výrobok nenoste na otvorených ranách a používajte ho iba podľa uvedeného medicínskeho návodu.

Instrucțiuni importante

Produsul medical [MD] este destinat utilizării individuale de către un singur pacient (1). Dacă se utilizează de către mai mulți pacienți, se pierde garanția oferită de producător în sensul specificat de Legea produselor medicale. Dacă în timpul folosirii produsului apar dureri excesive sau o senzație neplăcută, contactați medicul dumneavoastră sau tehnicianul ortoped. Nu purtați orteza pe răni deschise și folosiți-o numai în urma unui consult medical.

הערות חשובות

יש להשתמש במוצר הרפואי [MD] על חולה אחד בלבד (1). השימוש לטיפול ביותר מחולה אחד יגרם לביטול ביטוח אחריות המוצר של היצרן כמשמעותה בחוק מוצרים רפואיים. אם יופיעו כאבים מעבר לסביר, או הרגשת אי נעימות, בעת הרכבת המכשיר האורתוטי, יש ליצור קשר מידי עם הרופא או עם טכנאי האורטופדיה. אין להרכיב את המכשיר האורתוטי מעל פצעים פתוחים, ורק לאחר הנחיה רפואית.